

# 低周波マッサージ。

家族みんなで、  
いつでも、どこでも、ながらケア※



家事をしながら



テレビを見ながら



読書をしながら

※運転中や危険を伴う動作時は、使用しないでください。

**maxell**  
Within, the Future

2017.10

マクセル 低周波治療器 MXTS-MR100カタログ

## 低周波治療器

もみヶア

肩こり女子・肩こり男子へ



はるだけ  
マッサージ

### 効果・効能

肩こりの緩解(かんかい)、麻痺した筋肉の委縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。

家庭用低周波治療器

管理医療機器

**⚠ 安全に関するご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

### ⚠ 危険

下記のような医用電気機器との併用は絶対しない。  
(1) ペースメーカーなどの体内埋め込み型医用電気機器  
(2) 人工心肺などの生命維持用医用電気機器  
(3) 心電計など装着型医用電気機器などの各医用電気機器  
事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。

### ⚠ 警告

次の人は、医師と相談してご使用ください。  
(1) 急性疾患のある人  
(2) 悪性しゅよう(腫瘍)のある人  
(3) 感染症疾患のある人  
(4) 妊娠中、生理中、出産直後の人  
(5) 心臓に障害のある人  
(6) 体温38℃以上(有熱期の人)  
[急性発症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期。衰弱しているとき。]  
(7) 貧血ぎみの人  
(8) 適用部位の皮膚に異常(感染症、創傷など)のある人  
(9) 血圧に異常のある人  
(10) 安静を必要とする人や著しく体調がすぐれないとき  
(11) せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど急性[とう(疼)痛性]疾患の人  
(12) 糖尿病など高度な末しょう(梢)循環障害により知覚障害のある人  
(13) 上記以外に特に身体に異常を感じている人  
事故や体調不良をおこすおそれがあります。  
ゲルシートを貼る、接続する、はずすときは必ず電源を切る。  
強いショックを受けるおそれがあります。  
使用中に身体に異常を感じたら、直ちに使用を中止し、医師に相談する。  
事故や体調不良のおそれがあります。

- 掲載商品はEUの環境保護指令RoHSに準拠しています。
- 掲載商品の仕様およびデザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- 実際の商品と掲載写真は、印刷の関係で若干異なる場合があります。
- このカタログに掲載されている製品はすべてオープン価格です。
- このカタログの掲載内容は2017年10月現在のものです。

お問い合わせは  
マクセル株式会社 お客様相談センター

<http://www.maxell.co.jp>

マクセルお問い合わせ

〒151-8527 東京都渋谷区元代々木町30-13  
TEL (0570) 783-137 (ナビダイヤル) FAX (0570) 025-710 (ナビダイヤル)  
受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日および当社休業日を除く)

### ■マクセル製品取扱店

マクセル 低周波治療器カタログ JI021-1710 2017年10月作成



地球環境保護のために、このカタログには植物油インキを使用しています。

# 肩こり・筋肉をケアする、低周波マッサージ。



## 取り外せるゲルシート

肌に直接触れる、大きなゲルシートは取り外しが可能。交換用ゲルシートがあれば、ご家族で使い分けもできます。

※交換用ゲルシートは、MXTS-MGELシリーズをお使いください。




## 選べる5つのモード

ご使用の部位に合わせて選べる5つのモードを搭載。手動での切り替えが可能です。強さは10段階で設定できます。治療効果が高く、筋疲労が少ない1~100Hzの周波数帯を採用しています。


### モード1 首・肩に

「たたき」「パイプ」がメインのモード。

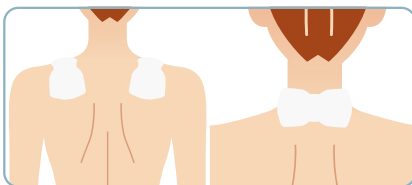


### モード2 背中に

「たたき」「もみ」「おし」がメインのモード。

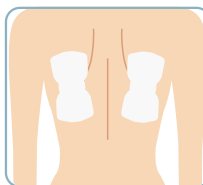

### モード3 腰に

「たたき」「パイプ」「もみ」など、周波数の高い動作がメインのモード。

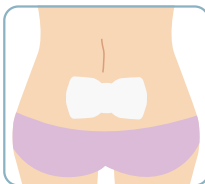

### モード4 腕に

「たたき」「パイプ」がメインのモード。




### モード5 脚に

「もみ」「おし」「パイプ」がメインのモード。



## はるだけカンタン コードレス + 充電式

本体にリチウムイオン電池を内蔵。コードレスなので、取扱いもカンタンです。電源のON/OFFは、LEDの表示ランプで確認できます。

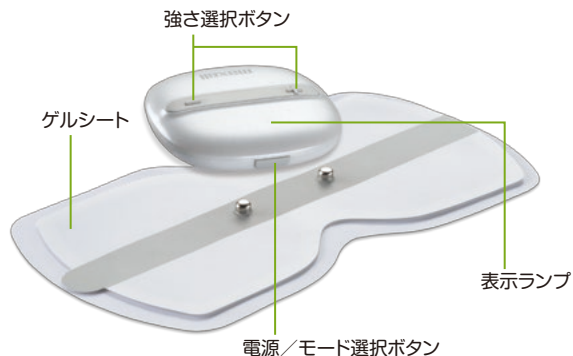

## 気配り&安全設計

やさしいもみ心地からスタートする気配り設計。ゲルシート面が体からはがれると、人体検知センサーのはたらきで自動的に停止します。

## 電源アダプタ・USBケーブル付き

充電用の電源アダプタとUSBケーブルを付属。約3時間で充電が完了します。1回の充電での使用回数は約15分×7回です。\*  
\*使用モードにより回数は異なります。



## ラインアップ

ホワイト		<ul style="list-style-type: none"> <li>MXTS-MR100W1P(1個/パック) JANコード 4902580755041</li> <li>MXTS-MR100W2P(2個/パック) JANコード 4902580755072</li> </ul>
ピンク		<ul style="list-style-type: none"> <li>MXTS-MR100P1P(1個/パック) JANコード 4902580755058</li> <li>MXTS-MR100P2P(2個/パック) JANコード 4902580755089</li> </ul>
ブラック		<ul style="list-style-type: none"> <li>MXTS-MR100B1P(1個/パック) JANコード 4902580755065</li> <li>MXTS-MR100B2P(2個/パック) JANコード 4902580755096</li> </ul>

## 主な仕様

販売名	低周波治療器 MXTS-MR100	出力パルス幅	200μ秒
型番	MXTS-MR100	セット内容	1個/パック:本体×1個、ゲルシート×1個、保管台紙×1個、電源アダプタ×1個、USBケーブル×1本、取扱説明書
類別	家庭用電気治療器		2個/パック:本体×2個、ゲルシート×2個、保管台紙×2個、電源アダプタ×1個、USBケーブル×1本、取扱説明書
医療機器の種類	管理医療機器	材質	本体ケース:PC+ABS ゲルシート:アクリル系ゲル
一般的名称	家庭用低周波治療器	タイマー	約15分自動オフ
医療機器認証番号	228AKBZX00042000	充電時間	3時間(室温10~35℃)
本体定格電圧	DC3.7V(リチウムイオン電池)	寸法	本体: 高さ44×幅44×奥行10.5mm ゲルシート:高さ60×幅125mm
専用電源アダプタ(充電用)	入力:AC100V 50/60Hz 0.4W 出力:DC5V 0.04A	質量	約21g(本体+ゲルシート)
最大出力電流	10mA以下		
最大出力電圧	最大約42V		
消費電力(動作時)	約0.1W		
消費電力(充電時)	約0.2W		
基本周波数	約1~100Hz		
タイマー定格時間	約15分		

## 交換用ゲルシート

MXTS-MGELW2P  JANコード 4902580755102	MXTS-MGELP2P  JANコード 4902580755119	MXTS-MGELB2P  JANコード 4902580755126
--	--	--

## 主な仕様

販売名	ゲルシートMXTS-MGEL	セット内容	ゲルシート×2個、保管台紙×2個、取扱説明書
型番	MXTS-MGEL	材質	アクリル系ゲル(ゲルシート)
医療機器の種類	一般医療機器	寸法	高さ60×幅125mm
一般的名称	家庭用低周波治療器向け導子	質量	約7g(1枚)
医療機器届出番号	40B2X10008000001		