

EMS 運動で理想の美尻、クビレに コードレス+充電式*1EMS 運動器*2「もてケア ウエスト&ヒップ」を発売



日立マクセル株式会社(取締役社長:勝田 善春/以下、マクセル)は、コードレスで充電式*1の EMS 運動器*2「もてケア ウエスト&ヒップ」を7月28日より発売します。

- ◎気になるウエストやヒップラインを集中的に鍛える3wayトレーニングモード搭載
- ◎多彩な15ステップのトレーニングパターン X 強度レベル15段階
- ◎「もてケア」従来タイプの2倍*3の出力強度
- ◎コードレス+充電式*1。リチウムイオン電池を搭載し、くり返し充電して使用が可能
- ◎薄くて柔らかいシリコン素材で、身体にフィット
- ◎電源アダプターと充電用USBケーブルを同梱

■製品情報

品名	型番	タイプ	入数	発売日	価格
EMS 運動器	MXES-H600YG	ウエスト&ヒップ用	本体×1、ゲルパッド×1セット	7月28日	オープン
交換用ゲルパッド	MXES-600GEL1P	ウエスト&ヒップ用	1セット(6枚入)		
	MXES-600GEL2P	ウエスト&ヒップ用	2セット(12枚入)		

健康意識の高まりにより、手軽に筋肉トレーニングができる商品のニーズが増えています。

このたび発売するEMS 運動器*2「もてケア ウエスト&ヒップ」は、「もてケア」シリーズの追加ラインアップで、女性の悩みで上位を占める*4、ウエストとヒップまわりを同時にトレーニングできる運動器です。

運動する時間がない、トレーニングが続かないという人に適しています。また、手軽で便利なコードレス&充電式*1なので、家事やテレビを見ながら、貼るだけで簡単にトレーニングを継続することができます。

気になるウエストラインやヒップまわりを集中的に鍛える3wayモードを搭載し、表層から深層まで確実に鍛えられ

るように、出力強度を従来タイプの 2 倍^{*3}に設定しています。多彩な刺激を体感できる 15 ステップのトレーニングパターンと強度レベル 15 段階を組み合わせることで、筋肉の慣れ^{*5}を防ぎ、効果的なトレーニングが可能です。

マクセルは、経営ビジョンである「スマートライフをサポート、人のまわりにやすらぎと潤い」に沿い、今後も人々の健康をケアする製品開発およびラインアップの拡充を図り、快適な生活をサポートしていきます。

*1 充電式:くり返し約 500 回の充電が可能です。当社試験結果にもとづく目安です。

*2 EMS (Electrical Muscle Stimulation) 運動器: 筋肉を電気刺激によって収縮させる機器です。

*3 2 倍の出力強度: 当社「もてケア」従来品との比較です。

*4 女性の悩みで上位を占める: マクセル調べ(女性 20~60 代 300 人 アンケート調査による)。

*5 筋肉の慣れ: EMS の使用において、筋肉への刺激が一定時間続く場合、刺激に対する反応が鈍くなる現象。

【お客様お問い合わせ先】

日立マクセル株式会社 お客様ご相談センター

〒151-0062 東京都渋谷区元代々木町 30-13 TEL: 0570-783-137(ナビダイヤル)

以上

添付資料

■主な特長

1. 気になるウエストやヒップラインを集中的に鍛える 3wayトレーニングモード搭載

3つのモード選択が可能で、気になる場所に合わせてトレーニングが可能です。

気になる場所に、あなたの悩みを 3Way でサポート

ウエスト&ヒップを 同時にトレーニングしたい人におススメ! ウエストを 集中的にトレーニングしたい人におススメ! ヒップを 集中的にトレーニングしたい人におススメ!

mode A : ウエスト&ヒップ

大腰筋・大殿筋 使用電極 6 極
腹斜筋・腹横筋
ハムストリングス

mode B : ウエスト

腹直筋・腹斜筋 使用電極 4 極
腹横筋


mode C : ヒップ

大殿筋 使用電極 2 極
ハムストリングス

独自の形状で つつみ込むようにフィット

2. 多彩な 15 ステップのトレーニングパターン X 強度レベル 15 段階

自動切り替えのオートトレーニングのため操作が不要です。多彩な 15 ステップのトレーニングパターンと強度レベル 15 段階を組み合わせることで筋肉の慣れ*5を防ぎ、効果的なトレーニングが可能です。

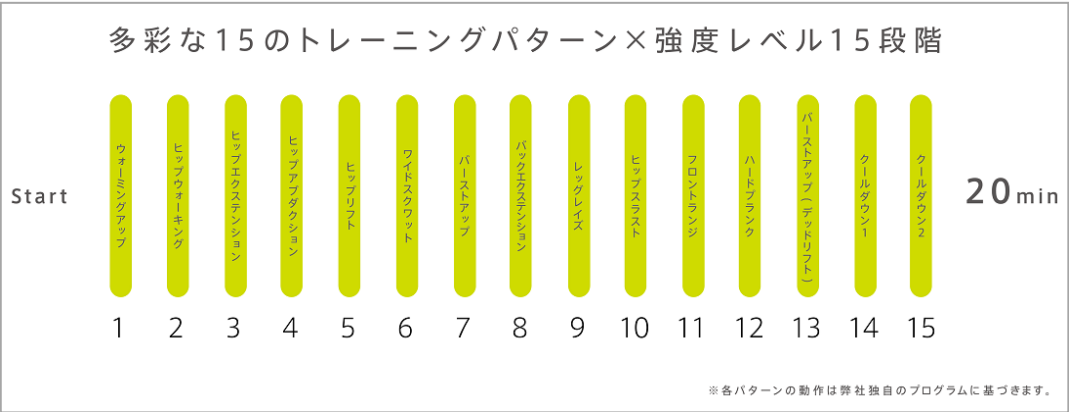

3. 「もてケア」従来タイプの 2 倍*3 の出力強度

大きな筋肉が集まるヒップや腰回りの表層から深層まで確実に鍛えることができるよう、出力強度を従来タイプの 2 倍*2 に設定しています。

4. コードレス+充電式*1。リチウムイオン電池を搭載し、くり返し充電使用が可能

電源およびコントローラを本体に内蔵した薄型のコードレスタイプ。充電してくり返し使えるリチウムイオン電池を搭載し、1 回の充電で約 20 分×10 回*6 使えます。

5. 薄くて柔らかいシリコン素材で、身体にフィット


腰からわき腹まで一度にトレーニングできるサイズ感、ヒップ全体を持ち上げるようなフィット感を実現。無駄のない形状を追及し、軽い装着感にもこだわっています。

6. 電源アダプターと充電用 USB ケーブルを同梱

充電のための専用の電源アダプターと充電用 USB ケーブルを同梱しています。

- *1 充電式:くり返し約 500 回の充電が可能です。当社試験結果にもとづく目安です。
- *2 EMS (Electrical Muscle Stimulation) 運動器: 筋肉を電気刺激によって収縮させる機器です。
- *3 2 倍の出力強度: 当社「もてケア」従来品との比較です。
- *4 女性の悩みで上位を占める: マクセル調べ(女性 20~60 代 300 人)。
- *5 筋肉の慣れ: EMS の使用において、筋肉への刺激が一定時間続く場合、刺激に対する反応が鈍くなる現象。
- *6 1 回の充電で約 20 分×10 回: 強さレベル 15(最大)の場合、使用モードによって異なります。

■名称と機能

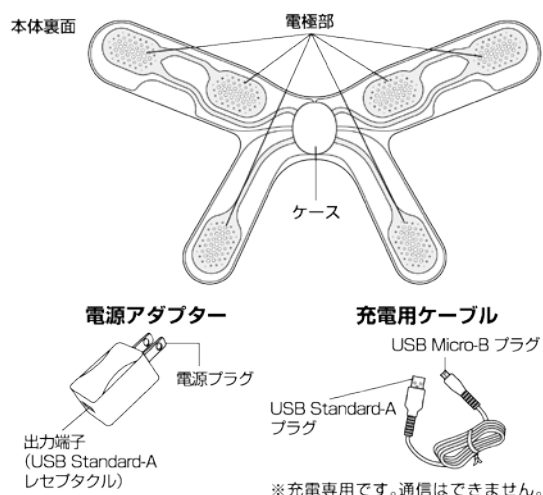

■本体: 主な仕様

型番	MXES-H600YG	
電極タイプ	6極タイプ	
本体	外形寸法	幅580×高さ340×厚さ17.4mm
	質量	約170g(ゲルパッド未装着時)
	入力電圧/電流	DC5V/最大110mA
	内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 200mAh
	充電時間	約3時間(10~35°C)
電源アダプター	入力	AC100-240V 50/60Hz 0.2A
	出力	DC5V/1.0A
同梱ゲルパッド	1セット(6枚入)	
同梱品	ゲルパッド・保管シート・電源アダプター・充電用ケーブル・取扱説明書	

■交換用ゲルパッド: 主な仕様

型番	MXES-600GEL1P	MXES-600GEL2P
寸法(1枚当たり)	幅 51.8 × 横 82.2 × 厚さ 0.85mm	
入数	1 セット(6 枚入)	2 セット(12 枚入)
質量(1枚当たり)	約 5g/1 枚	
材質	ハイドロゲル	

※掲載の写真・イラストは実物と異なる場合があります。
 ※製品仕様および外観は、予告なく変更する場合があります。

以上

ニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日時点のものです。
予告なしに変更され、発表日と情報が異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
